

Mode d'emploi

Identification du document	
Référence	ParserIO_Doc_v2.2.1.0.docx
Date de création	22/12/2010
Date de dernière mise à jour	27/06/2018
Nombre de pages	13



Identification du projet	
Nom du projet	Description
ParserIO.Benchmark	Programme de test utilisant le jeu d'essai Barcodestore.xml
ParserIO.Benchmark.Compare	Programme de test de résultats à utiliser avec ParserIO.Benchmark
ParserIO.Console	Client exemple utilisant le Core de type Console
ParserIO.Core	Core avec la classe Functions
ParserIO.Core.UnitTest	Tests unitaires des méthodes de la classe Functions
ParserIO.DAL	Data Access Layer
ParserIO.DAO	Data Access Object
ParserIO.Database	Ce projet sert à initialiser une base MS SQL Server
ParserIO.LegacyWS.Console	Client exemple utilisant le service SOAP ASPX .NET 2.0
ParserIO.LegacyWS.Service	Le ParserIO sous forme de Service SOAP ASPX.NET 2.0
ParserIO.ORM	Object Relational Mapping
ParserIO.Tools	Une collection d'outils
ParserIO.Tools.Console	Client Console du projet ParserlO.Tools
ParserIO.WCF.Client	Client exemple utilisant le service WCF
ParserIO.WCF.Service	Le ParserlO sous forme de Service WCF
ParserIO.WebAPI.Console	Client exemple utilisant le service Web API
ParserIO.WebAPI.Service	Le ParserIO sous forme de Web API
ParserIO.WebAPI.SPA	Client exemple SPA du service Web API
ParserIO.WinFormsApp	Client exemple utilisant le Core de type Windows Forms
ParserIO_COMClient	Client exemple en C++ utilisant l'interface COM

Historique du document	
Date	Action
22/12/2010	Publication de la première version par Davide Usai (Phast)
24/01/2011	Ajout du diagramme des classes et aligné sur la version 0.20 du Parser par Davide Usai
	(Phast)
02/03/2011	Aligné sur la version 0.22 du Parser par Davide Usai (Phast)
17/03/2011	Aligné sur la version 0.24 du Parser par Davide Usai (Phast)
28/04/2011	Aligné sur la version 0.26 du ParserlO par Davide Usai (Phast)
07/11/2011	Aligné sur la version 0.28 du ParserlO par Davide Usai (Phast).

tél: 01.82.83.90.00 - fax: 01.82.83.90.01 - web: http://www.phast.fr - e-mail: contact@phast.fr



_	·
	Ajout du jeu d'essai, du projet Benchmark et du projet DeltaXML
10/02/2012	Aligné sur la version 0.30 du ParserlO par Davide Usai (Phast).
27/09/2013	Aligné sur la version 1.0.0.0 du ParserlO par Davide Usai (Phast).
26/02/2014	Aligné sur la version 1.0.0.1 du ParserlO par Davide Usai (Phast).
12/05/2014	Aligné sur la version 1.0.0.3 du ParserlO par Davide Usai (Phast).
18/12/2014	Aligné sur la version 1.0.0.4 du ParserlO par Davide Usai (Phast).
24/06/2015	Aligné sur la version 1.0.0.5 du ParserlO par Davide Usai (Phast).
13/11/2015	Aligné sur la version 1.0.0.6 du ParserlO par Davide Usai (Phast).
10/12/2015	Ajouté un chapitre concernant les standards par Davide Usai (Phast).
05/04/2016	Développement de fonctionnalités pour le support du standard HIBC 2.5
28/06/2016	Publication de ParserlO en service de type WCF et WebAPI, mise à jour majeure des outils
	par Davide Usai (Phast).
29/09/2016	Gestion de la famille INTERNAL (91-99) de la norme GS1 et développement de l'algorithme
	en mode récursive par Davide Usai(Phast).
09/08/2017	Aligné sur la version 2.2.0.0 du ParserlO.
12/09/2017	Aligné sur la version 2.2.0.2 du ParserlO.
02/10/2017	Aligné sur la version 2.2.0.4 du ParserlO.
01/03/2018	Version 2.2.0.6.
	Gestion de l'Al GS1 241 : Customer Part Number Layout Windows Form avec l'utilisation d'un un Tab Control
11/04/2018	Version 2.2.0.8.
	List des identifiants Retour de la version de ParserlO
27/06/2018	Version 2.2.1.0.
	Report des valeurs GTIN-13 ou ACL-13 dans le champ UDI du ParserlO

4

Copyright © 2014 Association « Réxeau Phast » - Tous droits réservés. L'utilisation du contenu total ou partiel de ce document doit absolument être accordée par l'Association « Réseau Phast » .

L'INFORMATION HOSPITALIERE STANDARDISEE



Sommaire

1.	Présentation du Projet ParserIO	4
2.	Type du Code	
3.	SubType du Code	5
4.	Les fonctionnalités non couvertes	7
5.	ParserIO_functions	7
6.	La console Windows	9
7.	ParserIO en web-service	11
8.	Exemple de client du ParserlO en web-service	11
9.	ParserIO visible en tant qu'objet COM	12
10.	Le Jeu d'essai	12
11.	ParserIO Benchmark	12
12.	ParserIO Benchmark Delta	13
13.	Droit d'utilisation	13
14.	Téléchargement	13

1. Presentation du Projet Parserio

Les industriels utilisent presque toujours les technologies des codes à barres. Ces codes à barres sont conçus et gérés par et pour les industriels, autour des cas d'utilisation relatifs à la production et à la logistique.

Les codes à barres que l'on peut trouver sur le terrain respectent souvent un standard. Ils peuvent également être propres au fournisseur.

Le code à barres proprement dit est une représentation graphique d'une chaîne de caractères exprimant l'information. Les lecteurs laser présents sur le marché savent interpréter le code à barres et restituer la chaîne de caractères correspondante.

ParserIO est un analyseur syntaxique. Il prend en entrée la chaîne de caractères, l'analyse et retourne les informations contenues sous une forme structurée et exploitable.

Le Parser n'effectue aucun autre traitement. Tout au plus transforme-t-il la date pour la publier dans un format normalisé.

ParserIO dispose de deux qualités :

- La capacité d'interpréter le plus grand nombre de codes-barres,
- La portabilité pour une intégration et une exploitation dans des environnements les plus divers.

2. Type DU CODE

L'analyse syntaxique du code permet d'identifier son type et sa structure. Le type d'un code est lié à son standard.

Copyright © 2014 Association « Réseau Phast » - Tous droits réservés. L'utilisation du contenu total ou partiel de ce document doit absolument être accordée par l'Association « Réseau Phast ».

L'INFORMATION HOSPITALIERE STANDARDISEE



Voici la table de correspondance entre les standards supportés et les types :

Standard	Туре
European Article Numbering	EAN 13
Health Industry Bar Code	HIBC
Global System One	GS1-128 ou GS1-Datamatrix
Not a Standard	NaS

Les codes à barres, standards ou non, qui ne sont pas reconnus, sont considérés comme des codes du Type NaS, contenant une référence produit du fournisseur identique à la chaîne complète.

3. SUBTYPE DU CODE

Une analyse correcte d'un code nécessite parfois d'identifier son SubType. En fait, il s'agit d'identifier la « Variante » du Type. Pour comprendre la signification des valeurs SubType, il est nécessaire d'identifier le standard lui-même.

Voici une liste non exhaustive des valeurs possibles pour un SubType en fonction du standard.

EAN 13

SubType	Description
« » (Chaîne vide)	Structure EAN 13 classique. Le code est dans ce cas-là retourné en tant que GTIN-13.
ACL13	Variante utilisée pour coder un code ACL à 13 caractères dans une structure EAN 13. Pour toute information complémentaire, le lecteur est invité à utiliser le Cahier n°3 du CIP/ACL disponible sur le site web du CIP/ACL. Pour en savoir plus consulter le cahier téléchargeable ici : *

^{*:} http://www.ucdcip.org/pdf/CIP-ACL%20cahier%20n%C2%B03%20codification%20marquage%20produits%20sante.pdf

HIBC

SubType	Description
Primary	Variante Primary du Standard HIBC
Secondary Variante Secondary du Standard HIBC	
Primary/Secondary	Variante qui concatène un code Primary avec un code Secondary

Un SubType Secondary peut contenir plusieurs sous-variantes.

GS1-128 et GS1-Datamatrix

6

Copyright © 2014 Association « Réseau Phast» - Tous droits réservés. L'utilisation du contenu total ou partiel de ce document doit absolument être accordée par l'Association « Réseau Phast ».

L'INFORMATION HOSPITALIERE STANDARDISEE



L'analyseur ParserlO est capable d'interpréter toute chaîne de caractères dont la structure est de type GS1-128 et GS1-Datamatrix. Si un AI (Application Identifier) n'est pas géré c'est parce que il n'a jamais été trouvé sur le terrain. Seules les AIs trouvés sur le terrain ont fait objet d'un développement spécifique.



NaS

SubType	Description
NaS	Aucune interprétation possible de la chaîne
001	EAN 13 and LPP sans clé de contrôle
002	ACL 13 and LPP
003	ACL 13 and LPP sans espace
004	EAN 13 and LPP
005	Chris Eyes Company – Référence, Lot, Date d'expiration
006	COUSIN BIOSERV Company – Référence, Lot
007	BARD France Company – Référence, Lot, Date d'expiration (Obsolète)
008	PHYSIOL France Company - Référence, Lot, Serial (Obsolète)
009	Arthrex Company – Référence (Obsolète)
010	Arthrex Company – Lot (Obsolète)
011	Arthrex Company — Quantité (Obsolète)
012	SEM (Sciences Et Medecine) Company – Référence, Lot
013	ABS BOLTON Company - Référence
014	CHIRURGIE OUEST / EUROSILICONE / SORMED Company - Référence
015	Symbios Orthopédie – Référence, Date d'expiration (Obsolète)
016	Teleflex / Arrow – Référence, Lot, Date d'expiration (Obsolète)
017	FCI – Lot, Date d'expiration, Ind (pas traité, comme ADD.ID AI 240) (Obsolète)

4. LES FONCTIONNALITES NON COUVERTES

Les fonctionnalités effectivement rencontrées sur le terrain mais non développées dans cette version de ParserIO sont listées ci-après.

Aucune.

5. PARSERIO.CORE

Le noyau du projet est l'espace de noms ParserlO.Core qui contient la classe Functions et l'interface lFunctions.

La classe est écrite en langage C# en s'appuyant sur Microsoft .NET Framework, le tout est disponible sous forme de projet Microsoft Visual Studio 2015.

La méthode public InformationSet GetFullInformationSet(string code) prend en entré le code et retourne un objet contenant toutes les informations.

6. LE PATTERN

L'objectif est d'extraire l'information contenue, ou les informations contenues, dans une chaîne de caractères. La chaîne de caractères peut contenir une seule information, une référence de produit ou une date d'expiration par exemple, ou elle peut en contenir plusieurs voire des dizaines.

Copyrigh © 2014 Association « Réseau Phast » - Tous droits réseau Phast » - Tous droits réservés. L'utilisation du comenu total ou partiel de ce document doit absolument être accordée par l'Association « Réseau Phast ».

L'INFORMATION HOSPITALIERE STANDARDISEE



L'organisation des données dans la chaîne dépend du standard à laquelle elle se voit conforme. Au départ de l'analyse le ParserIO prend en entrée la chaîne mais il ne sait pas de quelle structure il s'agisse. C'est donc une reconnaissance préalable de la structure sui permettra ensuite l'extraction des données.

La particularité de l'identification de la structure préalable à l'extraction des données c'est le fait que l'on doit parfois juste « explorer » les données pour que l'identification de la structure puisse se faire. Dans certains cas la présence de certains caractères permet une identification plus robuste et moins complexe.

La structure d'une chaîne peut être identifiée à travers deux valeurs :

- Type
- SubType

Dans l'ordre l'on identifie d'abord le Type, ensuite le SubType.

Une fois que le Type et le SubType sont connus, le ParserlO peut procéder à l'extraction des données contenues dans la chaîne.

Dans l'implémentation actuelle, les méthodes s'appellent avec la désignation de la donnée. Donc une méthode prend toujours en entrée la chaîne.

Concernant l'adhérence du fonctionnement de ParserlO aux différences structures existantes actuellement reconnues, voici un aperçu des documents standards, par organisation en charge de leur maintenance:

AIM

L'organisation « The Association for Automatic Identification and Data Capture Technologies » s'occupe du standard ITS 0X-2010 Data Carrier/Symbology Identifiers Maintenance Document. Ceci pour le compte de l'organisation ISO. Le standard prend donc le nom de ISO/IEC 15424. C'est le standard qui nous permet, dans le ParserlO, d'implémenter la méthode SymbologyID. La diffusion du standard est interdite. Il est disponible sous paiement auprès de l'ISO.

Le paramétrage du lecteur du symbole code à barres peut modifier le résultat de la lecture. Certains dispositifs ne permettent pas un certain nombre de paramétrages. Notamment le fonctionnement du lecteur au regard de ces spécifications n'est parfois pas possible.

HIBCC

L'organisation « Heath Industry Business Communications Council » est en charge de l'évolution du standard ANSI/HIBC « THE HEALTH INDUSTRY BAR CODE (HIBC) SUPPLIER LABELING STANDARD ». Pour les codes conformes à cette structure, le ParserIO attribue le Type HIBC.

Les différentes SubType possibles pour le Type HIBC sont disponibles dans le standard :

- **Primary**
- Secondary

Le SubType Primary est définit par intention dans la *Table 1*.



Le SubType Secondary est définit par intention dans la Table 2. Par ailleurs, le SubType est défini par extension dans la Table F1.

Si un DI dans le Seconary est présent et pas encore géré, il sera retourné dans le champ Additional Information. Si plusieurs DI sont présents, ils seront séparés par un point-virgule.

GS1

L'organisation « Global System One » maintien de nombreux standards. Celui qui intéresse les codes à barres est le « GS1 General Specifications ». La diffusion du standard est interdite. Il est disponible sous paiement auprès de GS1.

Pour les codes conformes à cette structure, le ParserIO attribue soit le Type GS1-128 soit le Type GS1-Datamatrix. Ce choix dépend, quand l'information est présente, de la valeur du SymbologyID. Que ça soit un Type ou l'autre, dans la version actuelle de ParserlO, il n'y a pas de distinction entre les différentes valeurs possibles de SubType.

Ces structures se présentent comme une concaténation des données. Chaque donnée est précédée par son identifiant. Dans le jargon GS1, cet identifiant s'appelle AI, Application Identifier. Un AI est toujours numérique et sa longueur est de 2 caractères au moins. A titre d'exemple l'Al 01 précède un code GTIN, l'Al 10 précède un numéro de lot.

Etant donc une chaîne de Type GS1-128 et GS1-Datamatrix une séquence de données, une séquence d'Al représente les informations contenues et leur ordre.

Ces AI composent donc la valeur du SubType. Si plusieurs AI constituent la structure, ils sont séparés par des points dans la valeur SubType. A titre d'exemple, une structure de Type GS1-128 (ou GS1-Datamatrix) qui contient seulement un code GTIN et un numéro de lot aura 01.10 comme valeur de SubType.

Au regard de ces rapides explications et de la connaissance des différentes AI, l'on peut facilement imaginer les nombreuses valeurs possibles pour le SubType d'une structure de Type GS1-128 (ou GS1-Datamatrix).

Cette manière de représenter un SubType d'une structure de Type GS1 est propre au ParserIO. Rien n'existe à ce jour qui ait été normalisé par l'organisation GS1.

Certaines structures du Type GS1-128 (et GS1-Datamatrix) exigent l'utilisation de la fonctionnalité Groupe Separator.

Si la chaîne analysée contient les caractères GS (Groupe Separator), l'extraction de toute l'information présente doit être possible. Au contraire, si le GS n'est pas présent alors que la structure analysée l'exige, l'information sera partiellement extraite mais toujours correcte.

Le caractère GS peut, dans la version actuelle du ParserlO, être présent sous différentes formes :

- Symbol Character FNC1 ((char)0x001d)
- @

Le paramétrage du lecteur du symbole code à barres peut modifier le résultat de la lecture. Certains dispositifs ne permettent pas un certain nombre de paramétrages. Notamment la gestion du Groupe Separator par le lecteur peut être parfois complexe. Le GS peut se présenter sous formes

Copyright © 2014 Association « Réseau Phast » - Tous droits réservés. L'utilisation du contenu total ou partiel de ce document doit absolument être accordée par l'Association « Réseau Phast ».

10

Copyright © 2014 Association « Réseau Phast » - Tous droits réservés. L'utilisation du contenu total ou partiel de ce document doit absolument être accordée par l'Association « Réseau Phast ».

L'INFORMATION HOSPITALIERE STANDARDISEE



différentes, voire être tout simplement absent alors que le Symbole du code à barres le contient bien.

Si un AI n'est pas géré, toute la chaine résiduelle à sa droite sera retourné dans le champ Additional Information.

ANSI MHI

L'organisation ANSI, American National Standard Institute, publie différents standards maintenus par le MHI, Material Standard Industry. Un de ces standards est l'ANSI MH10.8.2 dont le titre est « Data Identifier and Application Identifier Standard ». La connaissance de ce standard est à la base des évolutions de la version 2.5 du standard HIBC.

tél: 01.82.83.90.00 - fax: 01.82.83.90.01 - web: http://www.phast.fr - e-mail: contact@phast.fr




7. LA CONSOLE WINDOWS

La console Windows est un programme de type Windows Forms Application utilisant Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. Il s'agit d'un simple consommateur des méthodes mises à disposition par la classe Functions.

Elle est disponible sous forme de projet Microsoft Visual Studio 2015.

La console est mono code. Cela veut dire qu'elle prend en entrée un seul code à la fois.

Voici une capture d'écran de la console Windows en utilisant le code suivant :

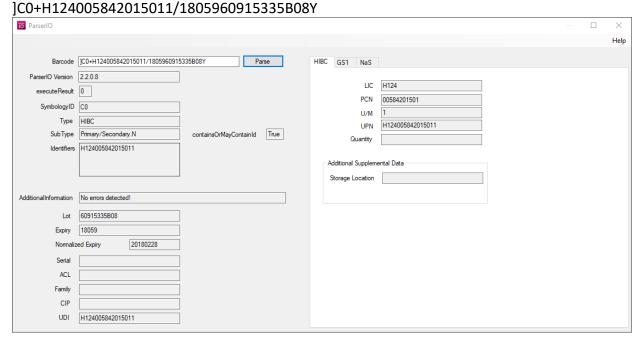

8. PARSERIO EN SERVICE

ParserIO est également disponible sous trois technologies de services. Ci-dessous une rapide description et les adresses URL :

- Legacy WS SOAP ASMX .NET 2.0 http://services.phast.fr/ParserIO.LegacyWS/parserio.asmx
- .NET WCF
 http://services.phast.fr/ParserIO.WCF/ParserIO.svc
- WebAPI 2.0
 http://services.phast.fr/ParserIO.WebAPI/Help/Api/GET-api-ParserIO-GetVersion

9. EXEMPLE DE CLIENT DU PARSERIO EN WEB-SERVICE

Phast met à disposition un exemple de client consommateur de ParserIO en Web-Service. Un client pour chaque service.



10. PARSERIO VISIBLE EN TANT QU'OBJET COM

L'interface IFunctions est visible en tant qu'objet COM.

Phast met à disposition un exemple de client consommateur de l'objet COM. Le client est écrit avec le langage C++ et est téléchargeable avec l'ensemble de la solution. Il peut faciliter le travail des éditeurs qui souhaiteraient utiliser en local les méthodes de l'interface IFunctions dans un environnement différent de celui utilisé pour le développement. La bibliothèque doit être enregistrée. Afin de toujours utiliser la dernière version de l'interface, le projet ParserlO.Core contient deux commandes dans le « Post build event command line » :

Dans la version actuelle du projet, cette interface est disponible seulement pour la version 1.0, l'ancienne, de la classe *Functions*. Prochainement elle sera également disponible dans la version par défaut.

11. LE JEU D'ESSAI

Phast met à disposition un **jeu d'essai**. Chaque élément du jeu d'essai est constitué d'un code à barres sous forme d'une chaîne de caractères ainsi que du résultat de son analyse. Le jeu d'essai se présente comme un fichier au format XML et son nom est « **Barcodestore_master_TimeStamp.xml** », où TimeStamp est la date et l'heure de génération. Il est également validé par un schéma XDS et son nom est « **Barcodestore.X.xsd** » où X est la version. Les deux fichiers sont disponibles en téléchargeant les sources du projet ParserIO.

Les codes à barres contenus dans le jeu d'essai sont issus de plusieurs campagnes de récolte sur le terrain. Les chaînes de caractères sont produites en sortie d'un lecteur monodimensionnel de code à barres.

Un paramétrage différent et/ou un lecteur différent pourraient donner un résultat différent suite à la l'interprétation d'un même symbole.

L'analyse des codes à barres a été faite manuellement en respectant les règles d'interprétation données par les standards respectifs.

L'utilisateur/développeur du projet ParserlO pourra se servir du jeu d'essai au moins de deux façons :

- 1. Tester un analyseur de codes à barres qu'il a développé
- 2. Tester des modifications qu'il a faites dans le projet ParserlO

12. PARSERIO BENCHMARK

Phast met à disposition un **outil de test de non régression**. L'outil s'appuie sur le jeu d'essai décrit cidessus et il peut consommer les méthodes deParserlO aussi bien par DLL que par service. Le projet appelé ParserlO.Benchmark est disponible dans la solution ParserlO. L'outil prend en entrée le jeu d'essai, récupère la liste des codes à barres et fournit un fichier en sortie avec l'analyse. La structure du jeu d'essai et du fichier en sortie est identique.

tél: 01.82.83.90.00 - fax: 01.82.83.90.01 - web: http://www.phast.fr - e-mail: contact@phast.fr

Copyright © 2014 Association « Réseau Phast» - Tous droits réservés. L'utilisation du contenu total ou partiel de ce document doit absolument être accordée par l'Association « Réseau Phast ».

L'INFORMATION HOSPITALIERE STANDARDISEE



13. PARSERIO BENCHMARK COMPARE

Une fois l'analyse terminée et le fichier en sortie créé, il s'avère parfois compliqué de faire un différentiel entre le fichier lui-même et le jeu d'essai.

Phast met à disposition un outil d'analyse du différentiel qui prend en entrée le jeu d'essai et le fichier créé par l'outil Benchmark et fournit en sortie un fichier contenant le différentiel.

Ce différentiel identifie précisément le nœud XML de l'objet « code à barres » qui porte la divergence. Le projet appelé ParserIO.Benchmark.Compare est disponible dans la solution ParserIO.

14. DROIT D'UTILISATION

La solution ParserlO est livrée sous licence GNU Lesser General Public License v3. Pour tout complément d'information sur les droits d'utilisation attachés à cette licence, nous vous conseillons de vous adresser à la page officielle de la licence : http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

15. TELECHARGEMENT

Phast délivre ParserIO à travers la forge GitHub : https://github.com/reseauphast/ParserIO